

お待たせいたしました

平成27年4月10日より発売



Front 前面支柱式長下肢装具

As a New Tool

脳卒中リハビリテーションにおいて、急性期から長下肢装具を使用し、早期に離床および歩行訓練を促していくことが近年主流になりつつあります。当社では、京都最大級の回復期病棟を有する京都大原記念病院の協力の下、既製品化長下肢装具“Front”(特開2014-54526号)を開発しました。

既製品化による超早期離床の実現 — すぐに装着

従来オーダーメイドの長下肢装具は、製作期間に1~2週程度の期間が必要でしたが、既製品化することにより、最短での離床訓練が可能となります。患者にとっても病院側にとっても最大の利点であるといえます。

簡単調節であなたにフィット — みんなに装着

1本でおおよそ8割の方に対応できます。




フィッティングの上で必要な調整は下腿前面の高さ調整のみなので素早く簡単に装着することができます。

大腿・下腿カフの装着部分にはラチェット機構を用いることで適応周径の幅が広がりました。

装着時の負担減 — 安全に装着

Front
従来型

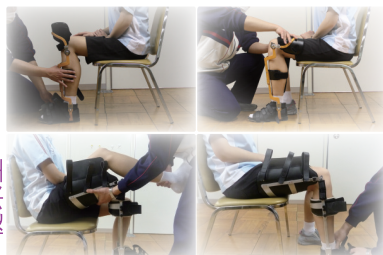

従来の長下肢のように後面に装具を通すことなく、前面から装着/調整することができるので、坐位での作業が可能となり、患者にとってもリハビリスタッフにとっても安全で負担の少ない装着を実現しました。

適応サイズ : 身長 150cm~170cm 体重 ~70kg

標準セット (ダイヤルロック×ダブルクレンザック)

※ パーツの追加・変更等各種カスタムも承りますので、下記までお気軽にお問い合わせ下さい。

【お問い合わせ先】



株式会社 Sportif

〒610-0342 京都府京田辺市松井山川 1-7

TEL:0774-62-0766 FAX:0774-62-9667 <http://sportif.co.jp>

製造元



株式会社 P.O.ラボ

<http://www.po-labo.com>

※印刷の関係上、商品の色は実際の色と多少異なる場合があります。
※商品の仕様およびデザインなどは改善のため予告なく変更する場合があります。

Demo機貸出受付中

Demo機使用後、弊社調査にご協力いただける場合、特別価格にてご提供中です。

